

permobil

AGILITY®
RÜCKENSYSTEME

ROHO

**AUSSERGEWÖHNLICH.
GENAU WIE SIE.**

HALTBARE UND VIELSEITIGE RÜCKENSYSTEME FÜR ROLLSTÜHLE MIT DER ROHO® AIR FLOATATION™-TECHNOLOGIE.

AGILITY-Rückensysteme von ROHO

Nachdem ROHO den Markt für Rollstuhlsitze und -positionierungslösungen bereits seit mehr als 45 Jahren erfolgreich unterstützt, war man überzeugt, dass es weitere Möglichkeiten geben muss, die Bedürfnisse von Experten und Nutzern zu erfüllen. Unsere Lösung: ein innovatives Rückensystem zur Positionierung.

VORTEILE




Das ROHO AGILITY-Rückensystem ist so konstruiert, dass es sich für verschiedene Körpergrößen und -formen eignet. Es kann mühelos angepasst werden und ist mit nahezu jedem Rollstuhl kompatibel. AGILITY-Rückensysteme sind extrem leicht und haltbar und so konstruiert, dass sie an Ort und Stelle bleiben.

ROHO AIR FLOATATION-Technologie


ROHO AGILITY-Rückensysteme sind besonders leicht und passen sich an den Körper ihres Benutzers an. AGILITY-Rückensysteme arbeiten mit der vollständig anpassbaren AIR FLOATATION -Technologie von ROHO, mit der die Luftmenge individuell mit dem Komfortlevel und den Veränderungen der Körperhaltung des Benutzers abgestimmt werden kann.

„Flip-a-bility“

- Anpassbar an verschiedenste Körperformen.
- Kann umgedreht werden und passt dann für einen breiteren Oberkörper oder breitere Schultern.

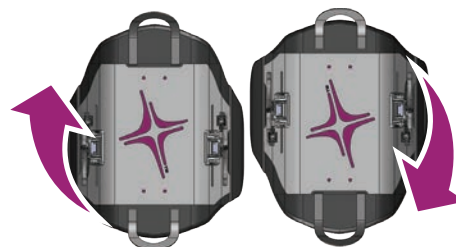


AGILITY-ZUBEHÖRTEILE

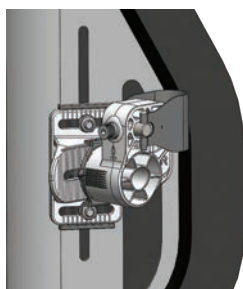

Feste Zubehörteile

Die festen Zubehörteile sind ideal für alle, die ihr Rückensystem nur selten abnehmen müssen.

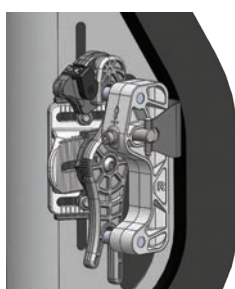

Schnellanschlusszubehör

Unser Schnellanschlusszubehör macht den Abbau für Transport- oder Aufbewahrungszwecke zum Kinderspiel, sogar für Personen mit eingeschränkter Handgeschicklichkeit. Einfach lösen und am Griff anheben.



AGILITY CARBON-Zubehör

Mit nur einer Klemme an jeder Seite sind die integrierten Zubehörteile von AGILITY CARBON besonders unauffällig und gleichzeitig kleiner, leichter und belastbarer als herkömmliche Zubehörteile von festen Systemen.

Feste und auch Schnellanschlussteile bestehen aus Zytel®, einem Produkt von DuPont™ mit einem hervorragenden Festigkeits-Masse-Verhältnis.

PRODUKTE

**ROHO AGILITY CARBON™-RÜCKENSYSTEM**

Mit seiner formgepressten und leichten Carbonfaserkonstruktion kombiniert AGILITY CARBON hochfeste Leistung mit einem schlanken Design. Unser Flachgewebe-12K-Carbonfaseraufbau spiegelt den neuesten Stand der Technik im Bereich der Hochleistungswerkstoffe wider. Das Ergebnis ist ein präzise gearbeitetes Sitzsystem, das genauso gut aussieht, wie es sich anfühlt.

Erhältliche Tiefen:
Minimum-Kontur: 7,5 cm
Mittlere Kontur: 10 cm

Erhältliche Breiten: 35,5 cm, 38 cm, 40,5 cm, 43 cm und 45,5 cm
Erhältliche Höhen: 25,5 cm, 33 cm und 40,5 cm

**ROHO AGILITY MIN CONTOUR-RÜCKENSYSTEM**

Das AGILITY Min Contour-Rückensystem bietet die ausreichende Haltungsunterstützung für unabhängige Rollstuhlfahrer, die eine gute Rumpfkontrolle haben und sich individuelle Anpassbarkeit für mehr Bewegungsfreiheit und Mobilität wünschen.

Tiefe des gesamten Rückensystems:
Mit Lufteinsatz: 7,5 cm

Erhältliche Modelle:
Schaumstoff mit Lufteinsatz + Lendenstütze

Erhältliche Breiten: 35,5 cm, 38 cm, 40,5 cm, 43 cm, 45,5 cm, 48,5 cm und 51 cm
Erhältliche Höhen: 25,5 cm, 33 cm, 40,5 cm und 45,5 cm

**ROHO AGILITY MID CONTOUR-RÜCKENSYSTEM**

Das AGILITY Mid Contour-Rückensystem wird empfohlen für Personen, die eine Unterstützung ihrer Haltung brauchen, in gewissem Maße abhängig beim Transfer sind und minimale Rumpfunterstützung benötigen.

Tiefe des gesamten Rückensystems:
Mit Lufteinsatz: 10 cm

Erhältliche Modelle:
Schaumstoff mit Lufteinsatz + Lendenstütze

Erhältliche Breiten: 35,5 cm, 38 cm, 40,5 cm, 43 cm, 45,5 cm, 48,5 cm und 51 cm
Erhältliche Höhen: 25,5 cm, 33 cm, 40,5 cm, 45,5 cm und 51 cm

**ROHO AGILITY MAX CONTOUR-RÜCKENSYSTEM**

Das AGILITY Max Contour-Rückensystem bietet ein erhebliches Maß an Haltungsunterstützung. Das Max-Kontur-Rückensystem empfiehlt sich für Personen mit (potenziellen) Schulter- oder Rückenschmerzen, die sich mehr Komfort sowie Unterstützung und Kontrolle für ihren Rumpf wünschen.

Tiefe des gesamten Rückensystems:
Mit Lufteinsatz: 18 cm

Schaumstoff mit Lufteinsatz + Lendenstütze

Erhältliche Breiten: 35,5 cm, 38 cm, 40,5 cm, 43 cm, 45,5 cm, 48,5 cm und 51 cm
Erhältliche Höhen: 40,5 cm, 45,5 cm und 51 cm

**ROHO AGILITY CUSTOM-RÜCKENSYSTEM**

Mit dem exklusiven AGILITY Custom-Rückensystem von ROHO gestalten Sie einen anpassbaren DRY FLOATATION®-Einsatz, der individuell auf die Körperform und die Anforderungen an die Haltungsunterstützung des Benutzer zugeschnitten ist.

Diese individuell anpassbaren Custom-Rückenteile sind für noch mehr Komfort und Unterstützung mit einheitlichen oder variablen Luftzellen mit DRY FLOATATION-Technologie erhältlich. Zur Kontrolle des Luftstroms können auch ein oder mehrere Luftventile eingeplant werden.

AGILITY Custom-Rückenteile sind mit allen AGILITY-Rückenschalen Größen kompatibel.

ROHO AGILITY-SEITENPELOTEN

AGILITY-Seitenpelotten sollen den Rumpf des Benutzers zusätzlich stützen und in Position halten. Seitenpelotten sind mit schwenkbarer und starrer Halterung für bündige oder Abstandsmontage erhältlich. Die Pelotten können einzeln bestellt werden, damit zum Beispiel eine starre mit einer schwenkbaren Halterung kombiniert werden kann; dies ermöglicht einen leichteren Transfer.

Schwenkbare Pelotten:

Ermöglichen dem Benutzer einen leichteren Transfer.

Erhältlich für bündige Montage oder Montage mit 1,5 cm; 2,5 cm oder 5 cm Abstand.

Die Halterungen werden mit geschwungener Basis, Schaumstoffpolster und Bezug geliefert.

Starre Pelotten:

Erhältlich für bündige Montage oder Montage mit 1,5 cm Abstand.

Die Halterungen werden mit gerader Basis, Schaumstoffpolster und Bezug geliefert.

Die AGILITY-Seitenpelotten wurden ausschließlich zur Verwendung mit den ROHO AGILITY Minimum Kontur-Rückensystemen und den ROHO AGILITY Mittleren Kontur-Rückensystemen entwickelt.

Starre Pelotte



Schwenkbare Pelotte

AGILITY-KOPFSTÜTZE UND ADAPTERPLATTE

AGILITY-KOPFSTÜTZE

Diese vielseitige Kopfstütze ist in jede Richtung komplett verstellbar. Sie lässt sich horizontal und vertikal anpassen und über ein Kugelgelenk drehen. Dank der Manschette zur Positionsblokierung können Sie die Kopfstützenbaugruppe abbauen, ohne dass die gewünschte Kopfstützenposition verloren geht.



AGILITY-ADAPTERPLATTE FÜR KOPFSTÜTZE

ROHO AGILITY-Adapterplatte für Kopfstützen wird zusammen mit den ROHO AGILITY-Rückensystemen verwendet, um im Handel erhältliche Rollstuhlkopfstützen zu befestigen. Die AGILITY-Adapterplatte für Kopfstützen ist kompatibel mit OEM-Kopfstützen.



WARUM ROHO?

Fachkompetenz

ROHO stellt bereits seit mehr als 45 Jahren Kissen her. Aktuell sind über eine Million Kissen in mehr als 65 Ländern auf der ganzen Welt in Gebrauch.

Führungsposition

Wir arbeiten aktiv mit Experten und Verbänden aus der Branche zusammen und lassen uns von dem erlesenen wissenschaftlichen Beirat von ROHO beraten, dem weltweit führende Forscher auf dem Gebiet der Druckschädigungen angehören.

Leidenschaft

Wir bieten unerreichten Kundendienst und eine hervorragende Produktgarantie und -gewährleistung, damit unsere Kunden von besten Produkten und exzellentem Service profitieren.

©2016 ROHO, Inc. Nachfolgend sind die Warenzeichen und eingetragenen Marken von ROHO, Inc aufgeführt: DRY FLOATATION®, AGILITY®, ROHO®, AIR FLOATATION™ und AGILITY CARBON™.

Zytel® ist ein eingetragenes Produkt von DuPont™

Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Bestellung und Anpassung von ROHO-Produkten von einem zertifizierten Reha-Fachmann beraten zu lassen.

permobil

ROHO



Permobil GmbH | Brandenburgerstrasse 2-4 | DE-40880 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 943400 | Fax +49 (0) 21027704962
info@permobil.de | www.permobil.com