

**permobil**

ORIGINAL ACCESSOIRES  
BODY  
SUPPORTS



**HOOFDSTEUN.  
LATERAALSTEUNEN**

# ONMISBAAR

## PERMOBIL ORIGINAL HOOFDSTEUN

Speciaal ontworpen om optimaal comfort te bieden. Eenvoudige aan te passen en de perfecte pasvorm voor de gebruiker. De Permobil Original Hoofdsteun wordt gebruikt om hoofd en nek te ondersteunen, vooral in een gekantelde en/of achteroverleunende positie.

De beugel van de hoofdsteun heeft een modulaire schakelsysteem. De schakels lopen bij elk scharnier in elkaar over om zo, door een hoge wrijving, meer grip te waarborgen, met als resultaat een stevige, lichtgewicht hoofdsteun. Het is mogelijk het aantal en de lengte van de schakels aan te passen om een juiste instelling te krijgen.

Beschikbaar voor alle Corpus® stoelen

**Waterproof** stretch hoes, verwijderbaar voor reiniging en hygiënische doeleinden

**Quick release** handig voor

- Verpleging
- Verzorging
- Transport

**Twee-laags** schuim voor extra comfort

**Innovatieve bevestigingsdelen** voor een standaard en korte rugleuning

### Modulair schakel ontwerp


- Twee formaten schakels: standaard en lang
- Nauwkeurige instelling
- Stevig en eenvoudig in gebruik
- Op maat voor iedereen door toevoeging van extra schakels.



**Kogel-verbinding** voor naadloze, 3-dimensionale aanpassing



**Keuze uit 3 formaten steunen\***

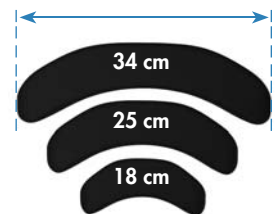

\*Uiteinden van de steunen zijn buigbaar voor extra comfort.

## PERMOBIL ORIGINAL LATERAAL ONDERSTEUNING

De lateraalsteunen vergroten de rompstabiliteit en balans van de gebruiker. Het ontwerp is slank en onopvallend maar biedt nog steeds grote aanpassingsmogelijkheden. Om ruimte te bieden bij een transfer zijn de steunen wegzwenkbaar of eenvoudig helemaal te verwijderen. De ruimte tussen de steunen kan ook snel aangepast worden zodat bijvoorbeeld een jas niet in de weg komt te zitten.

Beschikbaar voor alle Corpus® zitsystemen

**Lengte** van de steun is instelbaar door de steun te verschuiven

**Quick release** voor

- Herpositionering
- Transfer
- Transport doeleinden

**Waterproof** stretchhoes, afneembaar voor wassen en hygiëne doeleinden

### Instelbereik



**Keuze uit 2 formaten steunen**

- Small 80 x 130 mm
- Large 130 x 180 mm



**120° Wegzwenkbaar**

- trek aan de hendel voor
- Een makkelijke transfer
- Herpositionering
- De lengte kan ingekort worden door een schakel te verwijderen



# permobil